


PRODUCT FUNCTION

エレクトロポレーション

安定した電気パルスが美容成分をお肌へ。


有害成分をブロックするお肌の機能により、本来お肌は美容成分もブロックしていると言われております。PORの特殊波形で、お肌が本来持つ機能によって通過できない美容成分をお肌へ。

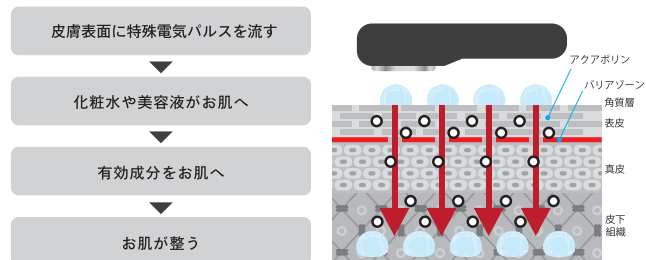

EMS+バイブレーション

微弱電流と振動で筋肉運動と美容成分の拡散を同時に。


EMSの作用で頭皮や肌を柔らかくします。加えてバイブレーションによる美容因子の拡散効果により、エステサロンのタッピング技術を自宅体験できます。

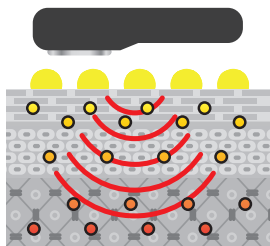

RED LIGHT

美容光線を浴びて、弾力ケア。

独自技術で実現した620～632nmの光量と照射距離のバランスによって、美容光線を適切にお肌へ照射して、お肌の弾力ケアを行います。活発で健やかなお肌と頭皮を維持するための機能です。

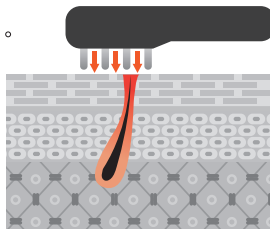

PRODUCT DETAILS

品 名：TILLET（ティレット）

価 格：107,800円(税込)

カ ラ ー：ブラック、ホワイト

サ イ ズ：縦140mm×幅60mm×高さ67mm

重 量：140g(バッテリー重量含む)

電 源：充電式リチウムイオン電池 7.4V/430ma

保 証：本体保証1年間

材 質：本体(ABS塗装仕上げ)、導子(ABS硬質3価クロムメッキ)、LEDレンズカバー(ポリスチレン)

付 属 品：充電用ACアダプター(USBケーブル)、フェイス用アタッチメント、取扱説明書(保証書)

生 産 国：日本

メーカー：WQC(株式会社渡久クリエイト)



お問い合わせ先

WQC [製造元/販売元]
株式会社 渡久クリエイト

〒213-0011 神奈川県川崎市高津区久本 3-10-9
TEL:044-822-0388 <https://wqc.jp/>



プロ仕様の美容ギア

TILLET

W-GEAR



MADE IN JAPAN

<https://wqc.jp/>

FOR HAIR

健康で健やかな頭皮のために

※専用アタッチメントをつけた状態でご使用ください。※ご使用前に、お使いの化粧水または美容液を塗布してください。※お手入れする箇所には、使用すること化粧水や美容液を塗布し、必ず濡れた状態でご使用ください。お肌表面の水分が不十分な状態で、通電が不十分になる場合があります。※ご使用の際は、2つの導子が同時に肌に触れるように軽く当てながら行ってください。




生え際から頭頂部

生え際から頭頂部までは、皮脂が多く出やすいところです。生え際から頭頂部までゆっくり動かしていきます。




耳周辺から頭頂部

耳周りはリンパが集中しているところなので、疲れが溜まりやすい場所です。耳の下あたりから髪をすくうように地肌を持ち上げ頭頂部に向け地肌を動かしていきます。

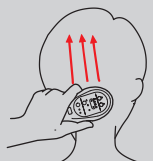

えりあしから頭頂部

頭頂部は頬を持ち上げて顔全体を支えている部分です。首の付け根から頭頂部までゆっくり上に動かします。

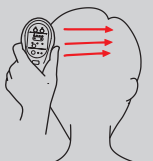

頭頂部

頭頂部は紫外線にあたりやすく、ダメージが大きい場所です。左から右へ(または右から左へ)ゆっくり動かします。

1台で2役。 プロ仕様の本格的な 頭皮ケア・肌ケアを。

◆ イオン導入

イオン電荷の性質を利用して、美容成分をお肌の奥まで。

◆ エレクトロポレーション

特殊電気パルス波形によって、ご自宅でエステサロン体験。

◆ EMS

微弱電流による電気刺激を筋肉へ。

◆ LEVEL

1～10まで電流を微調整できる出力レベル。

◆ RED LIGHT

620～632nmの可視光線でお肌を健やかに。

◆ バイブレーション

毎分8,000回の振動で、タッピング効果を再現。



リフトアップ



頬



額



ほうれい線




目の下・目尻



鼻筋・眉間



首のライン

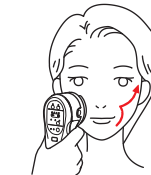

顔のたるみ



※ご使用前にシャンプーをし、しっかりタオルドライをおこなってください。※ご使用の際は、お使いの育毛剤を頭皮に十分につけ、12本の導子が同時に頭皮に触れるように軽く当てながら、上図を参考にしてください。

美肌 / リフトアップ

FOR FACE